



VACUTECH

北京康達和美經貿有限公司
HEALTH HOME ECONOMY TRADE CO., LTD

地址：北京市东城区崇外大街11号新成文化大厦608室
电话：010-67088375/76/77
传真：67088378
Email: healthhome@vip.sina.com

VACUDAP - OEM & VACUDAP 2004 OEM 与X射线系统全面集成的DAP解决方案

产品介绍

剂量与面积乘积 (DAP) 测量系统VacuDAP，是放射和透视诊断X射线设备的附件，非常适合用于监测患者接受的剂量是否符合当地法规要求。

VacuDAP-OEM和VacuDAP 2004 OEM型号上的矩形透光室，适用于市面上的大多数X射线设备，其测量值可通过串行接口或脉冲接口直接连接到数字X射线图像中。



VacuDAP – OEM

- 一体化的电离室和电子单元
- 数据通过串行接口RS485进行传输
- 透明电离室，2种尺寸可选
- 高时间分辨率，精准测量
- RS232接口转换线（选配）
- USB转接口（选配）
- CAN总线转换器(ISO 11898)（选配）
- 儿科适用

VacuDAP 2004 OEM

- 一体化的电离室和电子单元
- 数据通过脉冲接口RS422进行传输
- 透明电离室，2种尺寸可选
- 可与几款高压发生器兼容
- Sub-D接口转换线（选配）
- 开放接口转换线（选配）






通用技术规格/额定使用范围:	VacuDAP - OEM	VacuDAP 2004 OEM
电离室尺寸 [mm]	158 × 140 × 18 (156 00 15) 182 × 164 × 18 (158 00 15)	158 × 140 × 18 (156 00 10) 182 × 164 × 18 (157 00 15)
有效面积[mm]	123 x 123 (156 00 15) 147 x 147 (158 00 15)	123 x 123 (156 00 10) 147 x 147 (157 00 15)
显示单元	/	
线缆	RS232 接口转换线 (952 00 61-xy) 3/5/6/15/20/25/30m	Triad -> Sub-D (953 00 73-xy) 6/15/20/25/30m Triad-> 开放接口 (953 00 74-xy) 10/15/20/25m
电源	插入式电源 (950 00 75-xy) 与RS232 接口转换线配合使用	由X射线设备供电
导轨和适配器	导轨 147/150/152/170/176mm U型导轨 132/140/150mm 适配器 (适用附加滤过) 140/147/152/170/171/176mm 通用适配器 140 ... 190mm	
打印机	/	
接口	串行接口 RS485 (MEDI-SNAP®) 串行接口RS232 (接口转换线 952 00 61) CAN总线接口 (CAN总线转换器 952 00 65/66 sub-D 9/RJ45) USB 接口 (USB转换器 952 00 67)	脉冲接口 (Triad/Hirose)
数字分辨率-DAP	0.01 μGym ²	0.1 μGy ²
测量范围-DAP rate	6 ... 2 200 000 μGym ² /min	0.6 ... 1 800 000 μGym ² /min
时间分辨率	1 ms	
管电压	40 ... 150 kV	
气压	80 ... 106 kPa	
温度	+10 ... +40 °C	
湿度	10 ... 80 % 相对湿度(最大湿度 20 g/m ³)	
标准	IEC 60580, IEC 60601-1 以及 IEC 60601-2-43, IEC 60601-2-54的基本要求	



CAN总线转换器 (952 00 65/66)

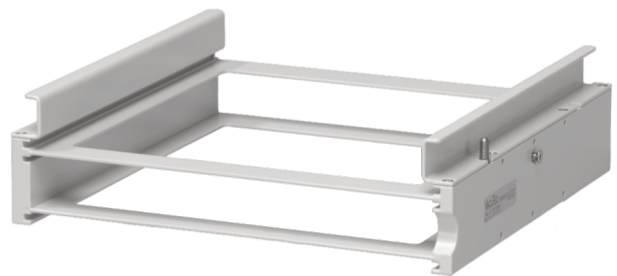

适配器(适用附加滤过)

